

•ANTROSOND

Dr. C. Antropoli

sapi med
SURGICAL
LINE

Specillo sterile e monouso per il drenaggio delle fistole anali

*Probe for drainage of anal fistula.
Disposable. Sterile*



CE
0476


Antrosond è la risposta moderna alla richiesta di perfezionare una tecnica molto diffusa e ampiamente suffragata dagli esiti positivi nel trattamento dei tramite fistolosi, in particolar modo perianali.

Si tratta di un dispositivo sterile, monouso per la specillazione delle fistole e la simultanea introduzione di mono drain in silicone per la trazione lenta degli sfinteri. Questa contemporaneità delle azioni comporta indubbiamente una riduzione dei tempi di intervento, un preciso posizionamento del drenaggio ed azzera il rischio di rottura del filo causato dalla tensione di trascinamento che con i sistemi tradizionali è pressoché inevitabile.

Antrosond has been designed to assist in the perfection of a widely used technique employed in the treatment of fistulas, and particularly perianal fistulas.

The technique itself is extensively supported by evidence of positive outcomes.

The Antrosond device is sterile and disposable, designed to explore fistulas and simultaneously introduce silicon drains for slow traction of the sphincter. This combined action reduces intervention time, allows drainage to be precisely positioned, and eliminates the risk of thread breakage due to the pulling tension unavoidable with traditional systems.

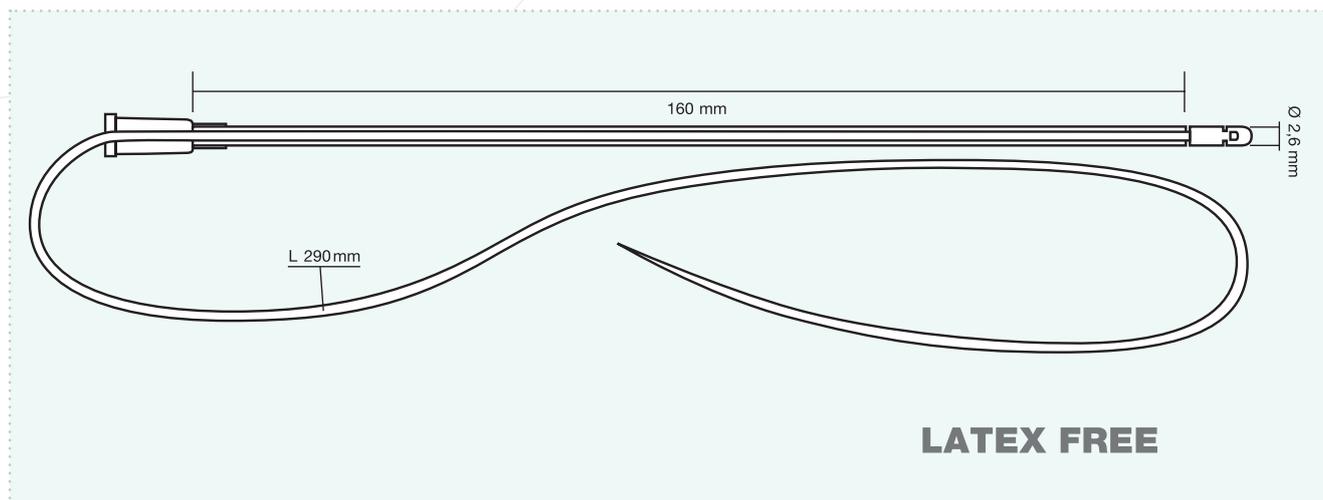

Antrosond è costituito da un tubicino trasparente ragionevolmente flessibile, lungo 160 mm e con diametro esterno di 2,6 mm; all'interno è inserito il Mono Drain, un filo in silicone biomedicale, anallergico lungo 290 mm. Una delle due estremità del tubicino termina con l'attacco universale luer per connettere una siringa ed eventualmente iniettare della soluzione fisiologica. Un capo del laccio termina con una testina rigida, ovalizzata che si innesta al tubicino rendendo le due parti solidali.

Antrosond consists of a flexible transparent tube 160mm long, with an external diameter of 2,6mm, combined with a 290mm non-allergic biomedical silicon thread (Mono Drain) inside. One end of the tube terminates in a universal female luer lock, to which a syringe may be connected to inject normal saline solution if required. One end of the tie has a rigid oval cap that engages with the tube to make a single integral device.

MODO D'USO

Individuato il tramite fistoloso, Antrosond si comporta come un normale specillo: si inserisce all'interno della fessurazione con l'estremità ovale, si percorre tutto il tratto e, in prossimità del foro d'uscita, con una mano si trattiene la testina rigida del filo e con l'altra si sfilta completamente la camicia esterna. A questo punto il laccio è correttamente inserito e posizionato per un drenaggio ottimale. Annodando le due estremità si può procedere con la messa in trazione delle fasce muscolari.

INSTRUCTIONS FOR USE

Antrosond is used like a normal probe. When the fistula has been identified, insert the hard oval end of the Antrosond into the fissure. Proceed slowly along the entire tract, and hold the end of the silicone thread near the entrance hole with one hand, and slide the tube out backwards with the other. The tie is now correctly inserted and positioned for optimal drainage. After knotting the two ends you can start to place the muscle bands under traction.

Confezione: n° 10 pz.

Quantity per box: 10 pcs.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Sterilised by: ETO